



DIVISORES ROTATORIOS DE MUESTRAS

Labtech Hebro Ltda.



LÍDER EN EQUIPOS Y ACCESORIOS
PARA EL MUESTREO Y
PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Labtech Hebro Ltda.

Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile

Fono: (56) 2 2331 2000

Fax: (56) 2 2208 9569

ventas@hebrolab.cl

ventas1@hebrolab.cl

www.labtechhebro.cl

Uno de los principales equipos utilizados actualmente para la preparación de muestras son los Divisores Rotatorios. Labtech Hebro, a través de los años, ha ido desarrollando, diseñando, fabricando y perfeccionando estas máquinas implementando nuevas tecnologías y aportando detalles que faciliten su operación.

Actualmente Labtech Hebro fabrica los siguientes tipos de Divisores Rotatorios:

- DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRA SIN RECHAZO
- DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRA CON RECHAZO
- DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRA TIPO PROSPLITTER
- DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRA DE SOBREMESA



DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS SIN RECHAZO

Equipo con distintas capacidades de trabajo, diseñado para cortar en segmentos idénticos el total de la muestra



La principal característica de este equipo está dada por la relación entre la capacidad de la tolva con respecto al total de los segmentos cortadores. Su número y tamaño puede variar de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Modelos	
Tipo	Capacidad
DR5	5 litros
DR10	10 litros
DR20	20 litros
DR30	30 litros
DR50	50 litros






DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS CON RECHAZO

Equipo diseñado para obtener un porcentaje específico del total de la muestra



Diseñado con un brazo giratorio donde se ubican dos o más segmentos cortadores cuya sección de corte estará definida por la fracción de muestra requerida por el operador, pudiendo ser por ejemplo: $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{25}$, etc. También es posible efectuar distintas combinaciones de segmentos de diversa capacidad en el mismo ensayo.

Modelos	
Tipo	Capacidad
DRR5	5 litros
DRR10	10 litros
DRR20	20 litros
DRR30	30 litros
DRR50	50 litros

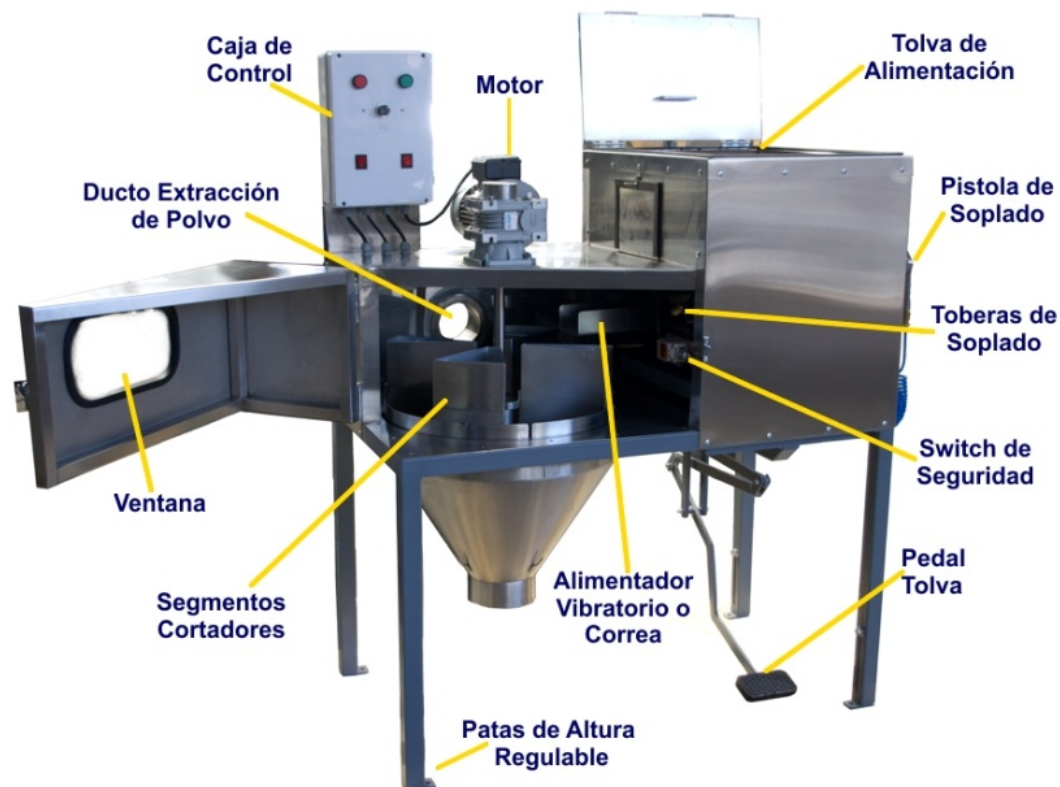



DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS TIPO PROSPLITTER

Equipo con distintas capacidades de trabajo, diseñado para cortar en segmentos idénticos el total de la muestra en capachos plásticos



Equipo diseñado para dividir la muestra en fracciones iguales conservando la representatividad y homogeneidad de la carga inicial.

Este divisor de muestras está compuesto principalmente por una tolva receptora, alimentador vibratorio de velocidad variable, tornamesa accionada por motorreductor, capachos plásticos y separadores de caucho.

Modelos


Tipo	Nº de Segmentos	Capacidad
M6	6 un	A elección
M12	12 un	A elección
M20	20 un	A elección
M30	30 un	A elección





DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS DE SOBREMESA

Equipo diseñado para operar sobre un mesón de trabajo

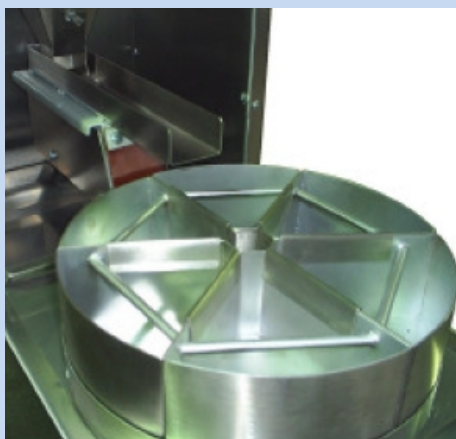

Al igual que el Divisor Rotatorio sin Rechazo, su objetivo es dividir la muestra madre conservando su homogeneidad.

Este divisor es pequeño y compacto, revestido totalmente en acero inoxidable y capaz de operar sobre un mesón de trabajo.

Modelos

Tipo	Capacidad
DR2	2 litros

